

REMINGTON® IPL6250

i LIGHT ESSENTIAL - IPL HAIR REMOVAL

ДИАГРАМА НА ТИПА КОЖА

Цвят на косата

Тен на кожата	Черен	Тъмнокафяв	Среднокафяв	Светлокафяв	Златист	Светлокафяв	Сив
I	✓	✓	✓	✓			
II	✓	✓	✓	✓			
III	✓	✓	✓	✓			
IV	✓	✓	✓	✓	X	X	X
V			X				
VI			X				

ВНИМАНИЕ: i-LIGHT REVEAL не е подходящ за много тъмна или черна кожа, бяла/сива или много светла руса/червена коса.

НЕ използвайте приставката около очите, веждите и миглите. Това може да причини сериозно и постоянно увреждане на зрението.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА I-LIGHT

Благодарим Ви, че купихте новия продукт на Ремингтън®. Преди да използвате уреда, моля прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете всички опаковки преди употреба.



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


- ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ИЗГАРЯНИЯ, ТОКОВ УДАР, ПОЖАР ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ:**
- Използвайте уреда само по предназначение както е описано в това ръководство.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или е в неизправност.
- Не оставайте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Пазете щепсела и кабела далече от горещи повърхности.
- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден. Смяната на кабела трябва да се извърши от съответния оторизиран сервиз на Ремингтън®.
- Използвайте и съхранявайте уреда при температури от 15°C до 35°C.
- Винаги използвайте само аксесоарите, които са в комплект с уреда.
- Не усуквайте и не прегъвайте кабела и не го увивайте около уреда.
- Корпусът на уреда не може да се мие и не е водоустойчив. Не потапяйте уреда в течности; не го използвайте

близо до вода във ваната, мивката или други съдове и не го използвайте на открито.



11. Убедете се, че кабелът и адаптерът не са мокри. Не докосвайте уреда, ако е паднал във вода – веднага изключете уреда от контакта.
12. Не включвайте и изключвайте уреда с мокри ръце.
13. Уредът може да се използва от деца над 8 години или от лица без познания, опит или с намалени физически, сензорни или умствени възможности, само ако те са наблюдавани / инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират всички свързани рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 години и са наблюдавани.
14. Пазете уреда и кабела му далеч от достъпа на деца под 8 години.
15. Този уред не е предназначен за търговска или професионална употреба.
16. Този уред трябва да се зарежда от одобрени изолиращи предпазни адаптери SW-120060EU (за Европа) или SW-120060BS (за Великобритания) с изходящ капацитет от 12 dc; 600mA (изход на адаптера).

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА i-LIGHT REVEAL

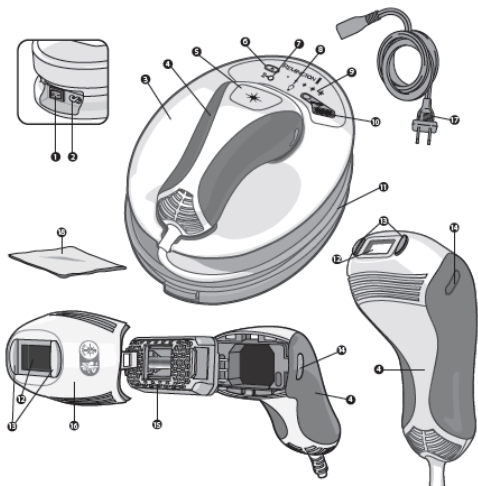

👁️ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВО

1. Бутон за включване/изключване
2. Слот за захранващ кабел
3. База
4. Дръжка
5. Флаш бутон
6. Бутон за избор на нивото на енергия
7. Индикатор за режима за охлаждане
8. Дисплей с индикатор за статуса на лампата
9. Индикатор за избраното ниво на енергия
10. Сензор за тена на кожата

11. Кабел
12. Флаш прозорец
13. Сензори за контакт с кожата
14. Бутони за освобождаване на приставката
15. Лампа
16. Приставка за тяло
17. Захранващ кабел
18. Кърпа без власинки

👁️ КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Бъдете търпеливи при първата употреба на Вашия i-LIGHT, тъй като, както при всеки нов продукт, ще отнеме известно време да се запознаете с продукта. Отделете необходимото време, за да се запознаете с Вашия i-LIGHT, тъй като сме уверени, че ще получите години приятна употреба и пълно удовлетворение.

👁️ ЗАПОЗНАВАНЕ С i-LIGHT REVEAL

*Какво е i-LIGHT?

Системата i-LIGHT е революционен уред, базиран на светлинна енергия и предназначен за отстраняване на нежелано окосмяване по тялото в домашни условия.

i-LIGHT използва подобна клинично доказана технология като, тази която използват професионалните дерматолози и салони, оптимизирана за лична употреба.

*Какво е “интензивна пулсираща светлина” (IPL) и как работи I-LIGHT?

PL - интензивната пулсираща светлина - е добре утвърдена технология, която се използва в цял свят повече от 15 години. i-LIGHT използва тази технология и насочва към кожата интензивен импулс от светлина.

Импулсът работи под кожата и се насочва към корена на косъма, като помага за спирането на неговия растеж (фиг. 1).

Фиг. 1




Светлинната енергия в импулса се насочва към тъмната пигментация и най-добрите резултати се наблюдават при по-тъмните косми.

За да избегнете насочването (и възможното увреждане) на тъмната кожа, трябва да използвате i-LIGHT само на светъл до среден тен на кожата (I-IV).

Фиг. 1

*Какво да очаквате от i-LIGHT?

Фиг. 2

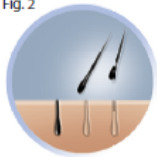


Резултатите не са незабавни, но повечето потребители на този уред ще започнат да забелязват по-малко косми в рамките на 1-2 седмици след започване на процедурите. През този период може да изглежда, че космите продължават да растат, но те всъщност биват „избутвани“ (фиг. 2).

Фиг. 2

Космите растат в цикъл от 3 различни фази, които продължават 18-24 месеца (Фиг. 3). Само космите в активната фаза на растеж са податливи на третиране. Поради тази причина са необходими многобройни третириания за оптимални резултати.

Active Growth

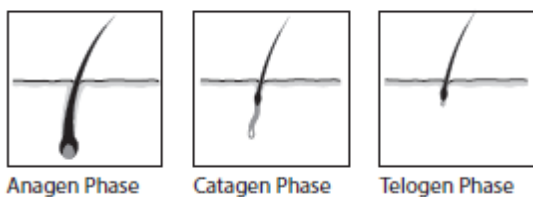

Anagen Phase

Catagen Phase

Telogen Phase

Фиг. 3

Важно е да продължите и да направите пълен обем от процедури и допълнителни третириания, за да се гарантира третирането на всеки активен косъм.

* Обем от процедури

Пълният обем от процедури обхваща три процедури на всеки две седмици.

Индивидуалните резултати могат да варират, затова може да са необходими многобройни третириания за оптимални резултати.

Част от космите ще израснат повторно, но те ще са по-разредени, по-тънки и по-светли в сравнение с предишните. Повторното израстване е нормално и трябва да се очаква.

След като приключите първоначалния обем от процедури, допълнителните процедури ще осигурят дори по-добри резултати.

Продължителната регулярна седмична употреба ще даде резултати в рамките на 6-12 седмици (при по-тъмен тен на кожата може да отнеме повече време).

* Бележка: Трябва да избягвате третирането на една и съща зона няколко пъти по време на една процедура, тъй като няма да подобри ефикасността, но ще увеличи риска от раздразнение на кожата.



ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ МЕРКИ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да започнете да използвате i-LIGHT:

Моля прочетете внимателно всички предупредителни мерки и мерките за безопасност.

Преди употреба се уверете, че уредът е подходящ за Вас.

Използвайте цветовата диаграма за определяне на типа кожа в началото на настоящото упътване, а също и вграденият сензор за определяне на типа кожа, за да прецените дали уредът е подходящ за Вас.

Използвайте диаграмата за цвета на окосмяването в началото на тази инструкция, за да се уверите, че уредът е подходящ за Вас.

***Тип кожа**

- Не използвайте, ако имате естествено тъмна кожа, тъй като това може да доведе до изгаряния, мехури и промени в пигментацията на кожата;
- Не използвайте върху кожа с тен или след скорошно излагане на слънце, тъй като това може да причини изгаряния и кожни увреждания;
- i-LIGHT не е ефективен при естествено бели, сиви, естествено руси или червени косми на тялото или лицето.

***Области, които не трябва да се третира**

- Да не се използва върху кожата на главата и ушите.
- Да не се използва върху лицето или шията.
- Да не се използва върху зърната на гърдите, ареолата на гърдите; гениталиите.
- Да не се използва върху зони с татуировки и перманентен грим.
- Да не се използва върху тъмно кафяви или черни образувания като бенки, белези по рождение или лунички.
- Да не се използва на места със скорошна хирургична намеса, дълбок пилинг, лазерно третиране, белези, изгорена или попарена кожа.

***Кога да не се използва/да се избягва употребата на i-LIGHT**

- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, ако имате ТЕН в зоната, която искате да третирате, тъй като кожата може да е прекалено тъмна в тези области и да доведе до подуване на кожата, мехури или може да промени пигментацията на кожата ви. Изчакайте тенът да изсветлее преди да третирате.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ върху кожа с нанесени козметични продукти, тъй като третирането на тези зони може да доведе до временно подуване на кожата, образуване на мехури или промяна на пигментацията. Винаги преди да третирате определена зона, я почиствайте старателно.
- НЕ ТРЕТИРАЙТЕ една и съща зона многократно в рамките на една процедура, това може да доведе до временно подуване на кожата, образуване на мехури или промяна на пигментацията на кожата.
- НЕ ТРЕТИРАЙТЕ една и съща зона повече от един път седмично, тъй като няма да ускори резултатите, но може да увеличи вероятността от подуване на кожата, образуване на мехури или промяна на пигментацията на кожата.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ върху увредена кожа, включително отворени рани, херпеси, слънчеви изгаряния или зони, в които е правен кожен пилинг или друга процедура за екسفолване през последните 6-8 седмици.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ върху раздразнена кожа, включително обриви или подута кожа. Тези състояния може да направят кожата по-чувствителна. Изчакайте засегнатата зона да се нормализира преди да използвате уреда.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, ако кожата ви е чувствителна към светлина. За да определите дали може да използвате i-LIGHT, направете тест на малка област от кожата и да изчакате 24 часа, за да определите дали няма нежелани реакции преди да преминете към третиране на по-обширни зони.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, ако сте бременна или може да сте бременна или кърмите. i-LIGHT не е тестван върху бременни жени. Хормоналните промени са често срещани по време на бременност или кърмене и могат да увеличат чувствителността на кожата и рисковете от кожни увреждания.
- НЕ СВЕТВАЙТЕ срещу каквото и да е друго, освен кожа.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ i-LIGHT за други цели освен епилация.
- НЕ ТРЕТИРАЙТЕ области, в които по-късно може да искате повторно израстване на окосмяването. Резултатите могат да бъдат постоянни и необратими.
- Ако сте се подлагали на лазерни или IPL процедури в професионални, клинични или в домашни условия или на електролизна епилация, изчакайте минимум 6 месеца преди да използвате i-LIGHT. Ако сте използвали методи за епилация като кола маска, пинсети или епилатор, в зоната която искате да третирате, изчакайте поне 6 седмици преди да използвате i-LIGHT. Уредът въздейства на частта от косъма, която се намира под кожата, за да деактивира корена на косъма. Затова уредът не е ефективен, ако космите са изскубнати от корен.

- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ директно върху или близо до активни имплантни медицински уреди като имплантиращ се пейсмейкър, вътрешен дефибрилатор или инсулинови устройства. Въпреки че по време на клинични изследвания не са наблюдавани никакви проблеми, свързани с употребата на този уред, се препоръчва да се спазват всички предупредителни мерки за активните имплантиращи се уреди относно употребата на електронни устройства, за да се избегнат повреди или спиране на активните имплантиращи се уреди.
- Не използвайте върху или близо до изкуствени материали като силиконови импланти, контрацептивни импланти Implanon, пейсмеикъри, подкожни инжекционни отвори (инсулинови диспенсъри) или пиърсинг.
- Устройства за безжични комуникации могат да повлияят на i-LIGHT и трябва да се поставят на разстояние от минимум 3.3 метра.

👁 ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

- * Запознайте се с функциите на Вашия нов уред i-LIGHT.
- * **Флаш прозорецът има вградена UV защита на кожата.**
 - ВНИМАНИЕ: винаги проверявайте флаш прозореца преди употреба, за да се уверите, че няма повреди на лещите.
 - ВНИМАНИЕ: Винаги почиствайте флаш прозореца преди употреба с кърпата без власинки, осигурена в комплекта, за да се уверите, че няма мазнини или остатъци по лещите.



* Сензори за контакт с кожата

- Този механизъм за безопасност предпазва от инцидентни импулси. Уредът няма да произведе импулс, освен ако двата сензора за контакт с кожата не са в пълен контакт с нея.



* Флаш бутон

- Флаш бутонът се намира на дръжката. Той се използва за активиране на импулса.



* Сензор за тен на кожата


- Ще позволи употреба само върху подходящ тен на кожата.



* ПРОВЕРЕТЕ ТЕНА НА КОЖАТА СИ

- Направете справка с цветовата диаграма на кожата и косата в началото на тази инструкция, за да се уверите, че кожата Ви попада в допустимия диапазон и цветът на косъма Ви е податлив на третиране с i-LIGHT.
- Поставете мястото, което ще третирате, върху сензора за кожа – уверете се, че сензорът докосва кожата. (Фиг. 4)
- Ако кожата Ви е подходяща, ще чуете звук „бийп“ и i-LIGHT ще се включи.
- Ако кожата Ви не е подходяща, ще чуете звук „бъзз“ и i-LIGHT ще остане изключен.

* **БЕЛЕЖКА:** Трябва да използвате сензора за кожа на всяка част от тялото, която искате да третираме.

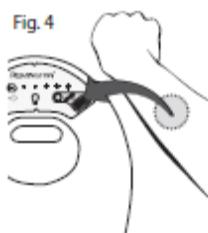


* ПОДГОТВЕТЕ КОЖАТА СИ ЗА ТРЕТИРАНЕ

- Уверете се, че зоната, която ще третирате е почистена от масла, дезодоранти, парфюм, грим, лосиони и кремове. Обръснете космите в зоната, която ще третирате и се уверете, че кожата е чиста и суха.
- Никога не използвайте кола маска, епилатор, пинсети или други методи, които премахват косъма от корена, тъй като IPL не е ефективна, ако косъма е бил изскубнат.

* ПОДГОТОВКА НА i-LIGHT ЗА УПОТРЕБА

- Развийте кабела на дръжката от базата на i-LIGHT и оставете дръжката отново на базата.
- Уверете се, че бутонът за включване и изключване на базата е на позиция OFF (изключено).
- Свържете захранващия кабел с базата i-LIGHT чрез захранващия слот.
- Включете захранващия кабел в контакта. Включете бутона за включване (ON). Фиг. 5

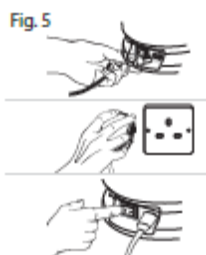

* ИЗБИРАНЕ НА ИНТЕНЗИТЕТА НА СВЕТЛИНАТА

- i-LIGHT има пет нива на интензитет на светлина. Ниво едно е най-ниската настройка и ниво пет е най-високата настройка.

* **СЪВЕТ:** За най-добри резултати винаги използвайте уреда на най-високото ниво, при което не усещате дискомфорт върху кожата.

- За да определите интензитета на светлината, който ще използвате, наблюдавайте броя на светлините, които светят на дисплея за интензитет на светлината.

Fig. 6



- Вашият i-LIGHT автоматично ще се настройва на интензитет на светлината 1 всеки път, когато уредът се включва. За да смените нивото, натиснете бутона за избор на интензитет на светлината.

* ТЕСТВАЙТЕ i-LIGHT НА ВАШАТА КОЖА

* Преди първото си пълно третиране тествайте i-LIGHT на малка част от кожата и изчакайте 24 часа, за да се уверите, че няма да има нежелани реакции.

- Започнете от първо ниво.

1. Поставете дръжката на i-LIGHT срещу кожата Ви, така че флаш прозорецът да застане плътно върху до повърхността на кожата.
2. Уверете се, че сензорите за контакт с кожата са напълно активирани и дисплеят за индикиране на статуса на лампата свети в зелено. (Фиг.7)

Fig. 7



3. Натиснете флаш бутона, за да произведете импулс

- Нормално е усещането на лек до среден дискомфорт. Ако импулс направен на ниво 1 на енергия е поносимо, то увеличете на ниво 2. Преместете уреда на различно място и светнете с i-LIGHT още веднъж. Повтаряйте този процес, докато намерите настройката, която е подходяща за Вас.
- Изчакайте 24 часа и после вижте тестваната зона. Ако кожата изглежда нормално, продължете с първото си пълно третиране на нивото, което сте определили като най-подходящо за Вас.

* **БЕЛЕЖКА:** Трябва да тествате уреда на всяка зона от тялото, която искате да третирате.

ТРЕТИРАНЕ

- Режим Мулти импулс: i-LIGHT устройството ще произведе импулс, когато флаш бутонът е натиснат и ще продължи да произвежда импулс на всеки три секунди, когато сензорите за контакт с кожата са покрити. Режимът Мулти импулс Ви позволява бързо да третирате големи области като просто плъзгате дръжката по кожата след всеки импулс.

* **Как да третирате:**

- Притиснете флаш прозореца плътно към кожата – Уверете се, че сензорите за контакт с кожата са напълно активирани.
- * **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато сензорите за контакт с кожата са напълно активирани, ще чуете звук „чърп“ и дисплеят с индикатор за статуса на крушката ще светне в зелено.

2. Натиснете флаш бутона, за да произведете импулс. Трябва да очаквате да видите ярка светлина (подобна на светкавица на фотоапарат) и трябва да почувствате леко усещане за топлина.

3. Преминете към следващата област и третирайте кожата последователно на зони, за да осигурите пълно покриване на третираната област.

- За режим Единичен импулс натискайте флаш бутона всеки път, когато преминете към следващата област.
- За режим Мулти импулс задръжте пръста си върху флаш бутона и плъзнете към следващата област, като се уверите че сензорите за контакт с кожата са напълно активирани. Следващият импулс ще се произведе автоматично след 3 секунди.
- * **БЕЛЕЖКА:** Ако докато използвате режима Мулти импулс, спрете да натискате флаш бутона или нарушите контакта с кожата, просто продължете третирането като повторите посочените по-горе точки.

СЪВЕТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ

- За най-добри резултати избягвайте застъпването на импулсите. Това помага да се предпазите от излагане на повече енергия от необходимата за потискане растежа на косъма. Това също така осигурява оптимална употреба на лампата.
- За най-ефективни резултати винаги използвайте на най-високото ниво на интензитет, което не причинява дискомфорт на кожата. Нивото, което използвате трябва да причинява усещане за топлина на кожата, но не бива да причинява дискомфорт.
- Може да забележите, че кожата, която лежи непосредствено върху кост като лакти, пищяли и глезени, е по-чувствителна по време на третиране.
- Това е нормално и не трябва да е повод за притеснение. За да избегнете чувствителност, се опитайте да опънете кожата настрани от костта по време на третиране.

ГРИЖА СЛЕД ТРЕТИРАНЕ

Може да усетите затопляне на кожата или леко зачервяване след процедурата. Това е нормална реакция и ще изчезне бързо. Следвайте изброените по-долу предпазни мерки след проведеното третиране, за да избегнете раздразнение на кожата:

- Избягвайте излагането на слънце 24 часа след всяка процедура. Защитете кожата си със слънцезащитен фактор SPF30, в продължение на 2 седмици след всяко третиране.
- Не удължавайте излагането на слънце на кожата като печене на слънце, в солариум или и не използвайте автобронзати, поне 2 седмици след третирането с уреда.
- Поддържайте кожата чиста и суха след всяка процедура и пийте много вода, за да я хидратирате.
- Не вземайте горещи душове, вани и не посещавайте парна баня, сауна, 24 часа след процедурите.

- Не участвайте в спортове, в които се осъществява физически контакт, 24 часа след процедурата.
- Не се обезкосмявайте (с кола маска, пинсета, епилатор, епилация с конец или кремове за депилиране) по време на използването на уреда – бръсненето е позволено само ако изчакате да преминат 24 часа след всяка процедура преди да се бръснете.
- Не използвайте избелващи кремове или парфюмирани продукти 24 часа след всяка процедура.



ДЪЛГОТРАЙНА ЛАМПА

- Дълготрайна лампа означава, че няма да е необходимо да използвате резервни части.
- Лампата в този уред има гаранция за работа през целия гаранционен период, както е оказано на гаранционната карта, която придружава продукта.
- При изключително невероятния случай, че Вашата лампа се изтощи, моля свържете се с местния център за обслужване на клиенти Remington®, където ще Ви осигурят друга лампа.

* Знаци, че лампата има нужда от смяна:

- Индикаторът за статус на лампата свети в жълто: 150 импулса остават в лампата.
- Индикаторът за статус на лампата мига в жълто: лампата е празна.



ПОЧИСТВАНЕ НА i-LIGHT УРЕДА



ВНИМАНИЕ: Преди почистване се убедете, че уредът е изключен и кабелът за зареждане е изваден от основната част на уреда.

- Регулярното почистване на уреда помага да се постигнат оптимални резултати при използването му и дълготрайност на експлоатацията му.
- За да почистите флаш прозореца, използвайте само кърпата, без власинки, която е предоставена с уреда. Погрижете се да не одраскате или пукнете флаш прозореца. Одрасквания и пукнатини могат да намалят ефективността на уреда.
- При упорити петна на флаш прозореца, навлажнете памучен тампон с медицински спирт или обикновен спирт, почистете флаш прозореца и нежно избършете с кърпата без власинки предоставена с уреда.
- Използвайте малка ръчна прахосмукачка, за да почистите прах и остатъци от дупчиците за вентилация на дръжката.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда, ако флаш прозорецът е пукнат или счупен. Никога не надрасквайте филтърното стъкло или металната повърхност от вътрешната страна на главата за третиране.



ВНИМАНИЕ: i-LIGHT уредът е високоволтажен. Никога не го потапяйте във вода. Никога не го почиствайте, както и всяка негова част, под течаща вода или в съдомиялна.

* **Съхранение**




- Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и го оставете да се охлади за 10 минути преди да го съхранявате.
- Съхранявайте уреда на сухо място на температура между 15°C и 35°C.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

- Прочете цялата инструкция, преди да започнете да използвате уреда i-LIGHT.
- Правете справка с инструкциите за отстраняване на проблеми, ако имате такива с i-LIGHT, в тази секция са адресирани основните проблеми, с които може да се сблъскате,
- Ако сте следвали инструкциите в тази секция и продължавате да срещате проблеми, моля да се свържете с местния сервизен център на Remington® за помощ.
- * Бутонът за включване/изключване е на позиция ON (включен), но уредът не работи.
 - Уверете се, че захранващият кабел е включен в работещ контакт.
 - Опитайте да го включите в друг контакт.
- * Уредът има пукнатини или е счупен.

- Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате притеснения относно употребата на продукта, спрете употребата и се свържете с център за обслужване на клиенти на Remington® за съдействие.
- * Включих уреда от бутона за включване, но не мога да увелича или намаля интензитета на светлината.
 - Опитайте да рестартирате уреда, като го изключите, изчакайте няколко секунди и го включите отново.
- * Светлинният индикатор за статус на лампата светва в зелено, но уредът не произвежда импулс, когато натисна бутона.
 - Уверете се, че сензорът за контакт с кожата е в пълен контакт с нея.
 - Опитайте да рестартирате уреда, като го изключите, изчакайте няколко секунди и го включите отново.
- * Появи се странна миризма.
 - Уверете се, че сте зоната е напълно обръсната, преди да я третираме.
- * Третираните зони стават червени след третиране.
 - Това е нормално и червенината трябва да изчезне. Ако не изчезне, опитайте с по-нисък интензитет на енергията.
- * ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ: Ако уредът е използван за дълъг период от време, той може за момент да се деактивира автоматично (за около 40 секунди), за да се охлади. След като уредът се охлади, той отново ще бъде готов за употреба.

LED светлини	<p>Всички посочени индикатори за избрания интензитет на светлината мигат</p> 	Уредът е прегрял и за момент е деактивиран, за да се охлади.
	<p>Всички индикатори за интензитет на светлината мигат</p> 	Уредът е в неизправност. Изключете го, изчакайте малко и опитайте отново. Ако проблемът продължава да съществува, уредът трябва да бъде върнат за ремонт.
	<p>Всички LED светлини мигат с с предупредителен звук „бийп“</p> 	Третиращата глава е извадена или не е фиксирана добре.
Звуци	<p>Няма пълен контакт.</p>	Флаш бутонът е натиснат, в момент, когато сензорът за контакт с кожата не е напълно активиран.
	<p>Сменете крушката.</p>	Лампата липсва или е необходимо да бъде сменена.
	<p>Сензорите за контакт с кожата не работят правилно.</p>	Флаш бутонът е натиснат след като сензорът за контакт с кожата е бил активиран от началото на употребата на уреда. Сензорите за контакт с кожата може да са забили.

➔ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

- За пълен списък от често задаваните въпроси, моля посетете www.remington-ilight.com

В: Кои зони от тялото си мога да третирам с i-LIGHT?

О: i-LIGHT е разработен за употреба от двата пола под шията, включително краката, под ръцете, бикини линията, ръцете, гърдите и гърба.

В: Какви рискове съществуват при употребата на i-LIGHT, безопасно ли е?

О: i-LIGHT е клинично тестван за безопасност и ефективност, но както при всяко електронно устройство, е важно да прочетете и да следвате инструкциите за употреба и предупрежденията за безопасност.

В: IPL опасна ли е за кожата след дълготрайна употреба?

О: Не са съобщени никакви странични ефекти или увреждане на кожата от дълготрайна употреба на интензивна пулсираща светлина (IPL).

В: Защо космите ми растат, въпреки че се третирам?

О: Резултатите не са незабавни, също така индивидуалните резултати могат да варират. Повечето потребители започват да забелязват по-малко косми в рамките на 1-2 седмици след началото на процедурите. През този период може да изглежда, че космите продължават да растат, но те всъщност биват „избутвани“.

Космите растат в цикъл от три различни фази, който продължава 18-24 месеца. Само космите във фазата на активен растеж са податливи на третиране с уреда. Поради тази причина са необходими многобройни третираня за оптимален резултат. Друга причина за продължаващия растеж може да бъде, че зоните са пропуснати по време на третиране. Повторете обема процедури, ако забележите повторен растеж.

В: Защо не мога да използвам i-LIGHT след скорошно излагане на слънце?

О: Излагането на слънце причинява увеличаване на нивата на меланин и излага кожата на по-висок риск от изгаряния или последващо лечение на мехури.

В: Имам ли нужда от защита за очите, докато използвам i-LIGHT?

О: Не, уредът не е вреден за очите. i-LIGHT притежава система за безопасност, която предпазва от инцидентен импулс, когато уредът не е в пълен контакт с кожата. Малкото количество светлина, което се отделя по време на третиране е подобно на светкавица на фотоапарат и не е вредно за очите.



МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми, дължащи се на опасните вещества в електрическите и електронни уреди, продукт с такъв символ не трябва да се изхвърля с обичайните битови отпадъци, а да се възстанови, използва повторно или рециклира.



➡ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГАРАНЦИЯ

Дефектите, касаещи функционирането на уреда в рамките на гаранционния период, ще бъдат коригирани чрез подмяна или ремонт от наша страна, стига уредът да се използва и поддържа в съответствие с инструкциите.

Вашите законни права не са засегнати.

Консумативите не са включени в гаранцията.

Гаранцията не обхваща дефекти, причинени от ремонта от неупълномощен дилър.

Гаранционен период – 2 години от първата покупка на дребно.

Вашите законни права не са засегнати.

При обаждане в сервизния център на Ремингтън®, трябва да продиктувате номера на модела, без който ние не можем да ви окажем нужното съдействие. Номерът на модела се намира на табелката с данни, разположена върху уреда.

ВРР България ЕООД – тел. 359 2 979 04 01